

## SYSTÈME STRUCTURE FRACTAL®



### IMPLANTS SÉRIES MONOBLOC

FILETAGE INTERNE M1.4

#### MF1

3.75h8-MF1  
3.75h11-MF1  
3.75h13-MF1

#### MF4

3.3h16-MF4 / longueur totale 20 mm (16+4)  
3.3h19-MF4 / longueur totale 23 mm (19+4)



### IMPLANTS SÉRIE OCTOGONE INTERNE

FILETAGE INTERNE M2-0.40

#### OF1

3.75h8-OF1                    3.3h8-OF1  
3.75h11-OF1                  3.3h11-OF1  
3.75h13-OF1                  3.3h13-OF1

Tous les implants Structure Fractal® sont livrés avec leur vis de couverture et une vis de transport en titane.

### FORETS

3 HAUTEURS DE FORAGE : 8 mm (jaune) - 11 mm (bleu) - 13 mm (rouge)  
1 ou 2 HAUTEURS DE MANDRIN selon la série :  
30 mm (avec irrigation interne haute)  
40 mm (sans irrigation interne haute)

#### FORETS POUR IMPLANTS Ø 3.75

##### Série **FR** maxillaire

FR-8L30 / FR-11L30 / FR-13L30  
FR-8L40 / FR-11L40 / FR-13L40

##### Série **FROD** mandibule (avec bande blanche)

FROD-8L30 / FROD-11L30 / FROD-13L30  
FROD-8L40 / FROD-11L40 / FROD-13L40

#### FORETS POUR IMPLANTS Ø 3.3

##### Série **FRE** crêtes étroites (avec bande noire)

FRE-8L30 / FRE-11L30 / FRE-13L30

##### Série **FPXL** ptérygoïde

Longueur 60 mm



VICTORY S.A. 11, rue Lamartine - 06000 NICE - FRANCE  
Tél. : [33] (0)4 93 62 21 01 - Fax : [33] (0)4 93 16 08 33  
www.victoryimplants.fr - Email : info@victoryimplants.fr

1 SEUL FORET, 1 SEUL IMPLANT :  
**SYSTEME FRACTAL®**  
CONCENTREZ-VOUS SUR L'ESSENTIEL



LOOPING COMMUNICATION 04 92 97 94 00 textes et visuels non contractuels



## Le foret qui concentre, à lui seul, l'activité de 6 forets successifs



- ➔ Un foret POINTEUR pour un centrage haute précision sans dérapage
- ➔ Un foret TRACEUR pour élargir le pointage
- ➔ Un foret CENTREUR pour orienter l'ostéotomie en fonction du trajet choisi (guidage dynamique, guide chirurgical, parallélisation à une dent adjacente ou à un autre implant)
- ➔ Un foret ELARGISSEUR pour porter l'ostéotomie au diamètre final de l'implant
- ➔ Un foret CRESTAL pour formater la crête osseuse à l'émergence de l'implant
- ➔ Un foret de DETOURAGE pour créer la loge de la vis de couverture en cas de technique enfouie

➔ **Acier chirurgical à très fort pouvoir coupant**

➔ **Irrigation interne haute**

➔ **Stop de sécurité actif**

En bloquant le foret à la hauteur choisie, ce stop évite toute pénétration intempestive dans un territoire anatomique critique (nerf alvéolaire inférieur, sinus, fosses nasales). La rainure couleur surmontant ce stop facilite le positionnement de l'implant au niveau souhaité en cas de technique sans lambeau («flapless»).

➔ **Collecte à 100% du tissu osseux**

De par sa forme cylindro-hélicoïdale, le foret Fractal® assure une collecte à 100% du tissu osseux d'ostéotomie.

➔ **Aucun échauffement**

grâce à l'évacuation instantanée des calories




## L'implant ultra performant à la pointe de l'innovation

- ➔ Macro géométrie associant les propriétés du cylindre, du cône et de l'hélicoïde pour une stabilité primaire absolue
- ➔ État de surface fluoré, nano rugueux - efficacité prouvée sur cultures issues d'ostéoblastes de mâchoires humaines
- ➔ Extrémité apicale spécifiquement arrondie et profilée pour auto-sinus lift
- ➔ Emergences permettant toutes les options esthétiques et prothétiques (vissée, scellée)




Exemple : 3.3h8-OFI  
Ø 3.3  
Longueur 8 mm  
octogone interne

- ➔ 2 émergences (monobloc ou octogone interne)
- ➔ 2 diamètres (3.3 mm et 3.75 mm)
- ➔ 3 longueurs (8, 11 et 13 mm) + série ptérygoidé

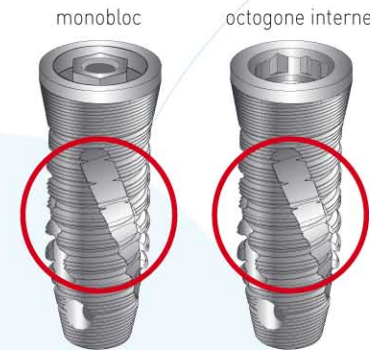

Implants Ø 3.75

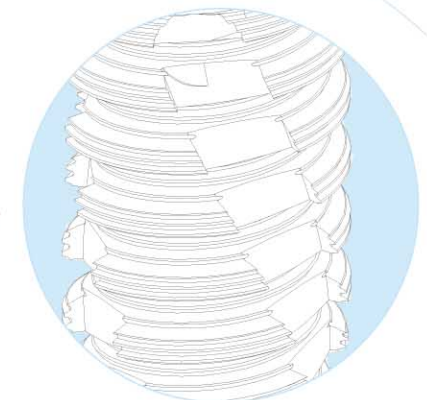

Microfiletage dans chaque macrospire (Ø 3.75 uniquement)